

LOTTO 2 – ID 6

DESCRIZIONE PRODOTTO

**Provette sterili in PET (polietilentereftalato)
cilindriche Ø 13x100 mm senza additivo
Vuoto predeterminato: 6 ml**

MARCA:

VACUTEST[®]

DIMENSIONI E SPECIFICHE:

**Provette cilindriche in PET (polietilentereftalato)
trasparente, resistente agli urti**

Materiale: polietilentereftalato


Diametro: 13 mm esterno provetta,

Altezza: 100 mm

Tappo e copritappo di sicurezza RIPOSIZIONABILE



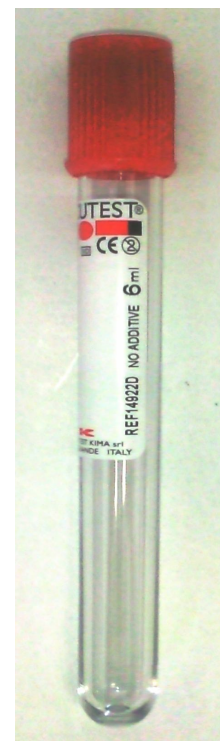

**Tappo di gomma
butile perforabile,
nero.**

**Copritappo di sicurezza antischizzo e
antiaerosol, in polietilene.
Altezza presa di sicurezza 20 mm.
Ha funzione di protezione
dell'operatore**



**Immagine del
codice 14922D**

CODICE PRODOTTO E VARIANTI COLORE TAPPO

<u>Colore tappo</u>	<u>Codice prodotto</u>	<u>Immagine Tappo</u>
BIANCO	149425	
BLU	14925D	
ROSSO	14922D	
TERRA DI SIENA	14915D	

LOTTO 2 – ID 6

GIALLO OCRA

14970



Sono disponibili eventualmente ulteriori colori sulla base della seguente tabella:

Blu elettrico	Azzurro	Azzurro trasparente	Blu	Arancio	Giallo ocra	Giallo	Beige
Terra di Siena	Marron	Trasparente	Bianco	Grigio	Nero	Verde	Verde scuro
Verde acqua	Viola	Viola trasparente	Fucsia	Rosa	Rosso	Rosso trasparente	

Additivo

NESSUNO

VUOTO PREDETERMINATO: 6 ml

VALIDITA' NOMINALE: 18 (diciotto) mesi
dalla data di produzione

Sterilizzazione:

Vacutest Kima S.r.l. Via dell'Industria, 12 35020 Arzergrande (PD) Scheda tecnica		PAGINA 3 DI 5 REVISIONE	DATA 03/05/2010
---	--	--------------------------------	-----------------

LOTTO 2 – ID 6

Mediante irraggiamento, in accordo alle norme:
UNI EN 556-1 Requisiti per i dispositivi medici che recano l' indicazione sterile,
UNI EN ISO 11737-2 Metodi microbiologici – Prove di sterilità eseguite nel corso della convalida di un processo di sterilizzazione,
UNI EN ISO 11137-1:2006 Sterilizzazione dei prodotti sanitari – Radiazione – Parte 1

Certificazioni materiali:

Tutte le materie prime e i materiali utilizzati, sono atossici, per usi alimentari e medicali certificati, secondo la legislazione Europea e FDA (USA) vigenti.

Confezionamento:

supporto	Scatola interna	Imballo di spedizione
Rack in plastica da 50 pezzi	Da 100 pezzi (contiene 2 supporti da 50 pezzi) Sulla confezione sono stampati i seguenti dati: nome commerciale "Vacutest Plast", nome produttore ed indirizzo, dimensioni della provetta, marchio CE, simbologia di sterilità, di conservazione e d'uso, numero di pezzi contenuti. Sulla scatola sono apposte due etichette: la prima multilingue sigilla la confezione, la seconda riporta i seguenti dati: codice, colore tappo, descrizione contenuto, volume di aspirazione, lotto e scadenza (anno e mese). Ogni scatola contiene una istruzione con le modalità per l'utilizzo delle provette.	Da 1000 pezzi (contiene 10 scatole da 100 pezzi) Sulla confezione sono stampati i seguenti dati: nome commerciale "Vacutest Plast", nome produttore ed indirizzo, dimensioni della provetta, marchio CE, simbologia di sterilità, di conservazione e d'uso, numero di pezzi contenuti. Sulla scatola è apposta una etichetta contenente i seguenti dati: descrizione multilingue, nome commerciale "Vacutest Plast", marchio CE, nome produttore ed indirizzo, codice, descrizione contenuto, data produzione (anno e mese) scadenza (anno e mese), lotto, quantità e colore di identificazione della provetta, simbologia di sterilità, di conservazione e d'uso. Ogni scatola contiene le istruzioni per l'uso e modalità di prelievo, in multilingue.

Etichette sulle provette:

Applicata – bianca autoadesiva 40x20 mm, stampa in tre colori. L'etichetta riporta: nome commerciale "Vacutest Plast", Emo, marchio CE, Sterile Interior R, lotto, scadenza (anno e mese), REF (codice provetta), volume di aspirazione + dati sensibili variabili + produttore + simboli d'uso.
 Livello di riempimento

Destinazione d'uso:

Vacutest Kima S.r.l. Via dell'Industria, 12 35020 Arzergrande (PD) Scheda tecnica		PAGINA 4 DI 5 REVISIONE	DATA 03/05/2010
---	--	--------------------------------	-----------------

LOTTO 2 – ID 6

Sono utilizzate per la raccolta di liquidi biologici in modo sterile.
 Conservazione del campione: in funzione della sensibilità alla temperatura del campione raccolto.

Questo prodotto deve essere utilizzato da operatori professionalmente qualificati

Velocità di centrifugazione consigliata:

Secondo i protocolli adottati nel laboratorio al quale sono consegnati i campioni

Compatibilità con le strumentazioni Analitiche:

Non sono state segnalate incompatibilità con la strumentazione automatica attualmente in commercio. L'utilizzatore deve verificare la compatibilità delle dimensioni esterne della provetta con quelle richieste dallo strumento in uso presso il laboratorio.

Stoccaggio e conservazione:

**Lo stoccaggio e la conservazione delle provette per lungo tempo deve avvenire ad una temperatura compresa in un range da +5 a +25 °C, in luogo asciutto.
 Le provette devono essere stoccate con il tappo rivolto verso l'alto, così come indicato dalle frecce stampate sulla confezione esterna.**

Modalità di smaltimento:

**Prima dell'uso sono da considerarsi rifiuti non pericolosi: CER 18 01 07 "sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 08*".
 Dopo l'uso sono rifiuti sanitari potenzialmente infetti: CER 18 01 03* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti, applicando precauzioni particolari per evitare infezioni.**

Sistema di qualità applicato per la fabbricazione e norme di riferimento:

UNI EN ISO 9001:2008 certificato ICIM n. 4264/1 emesso da ICIM S.p.a. in data 18/01/2007, data corrente 18/01/2010

UNI EN ISO 13485:2004 certificato ICIM n. 4265/1 emesso da ICIM S.p.a. in data 18/01/2007, data corrente 18/01/2010

CE: Sistema di garanzia della qualità attraverso emissione della Dichiarazione di Conformità CE dopo la predisposizione dei fascicoli tecnico-produttivi secondo la Direttiva CEE 98/79/CE (D.L. 08/09/2000 N.332) a disposizione dell'autorità competente.

UNI EN 928 Sistemi diagnostici in vitro – Guida all'applicazione delle norme EN 29001, EN 46001 e delle EN 29002 E EN 46002

Vacutest Kima S.r.l. Via dell'Industria, 12 35020 Arzergrande (PD) Scheda tecnica				PAGINA 5 DI 5 REVISIONE	DATA 03/05/2010
---	--	--	--	--------------------------------	-----------------

LOTTO 2 – ID 6

EN 375 Sistemi diagnostici in vitro – Requisiti per le etichette e le informazioni sul prodotto relativi ai reagenti per la diagnostica in vitro ad uso professionale

UNI EN 980 Simboli grafici utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici

UNI EN 1041 Informazioni fornite dal fabbricante con i dispositivi medici

UNI EN 14971 Applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici