


SCHEDA TECNICA

Lancetta pungidito sterile

Nome commerciale:	Chemil-Soft
Fabbricante:	Sterilance medical (Sozhou) inc.
Mandatario Europeo:	Emergo Europe – Molenstraat, 15 – 2513 BH the Hague The Netherlands.
Distributore per l'Italia:	Chemil s.r.l. Via Canada 23 – 35127 Padova.
Descrizione del prodotto:	Lancetta monouso sterile, latex free, ago a triplice affilatura secondo ISO 7864 (permette una penetrazione rapida riducendo la dolorosità), realizzato in acciaio inox (304/1Cr18Ni9), siliconato. Corpo della lancetta in HDPE con tappino copri-ago da togliere al momento dell'uso.
Standard di riferimento:	ISO 13485; ISO 9001; ISO 7864; ISO 10993-1-5-10; ISO 15223.
Classe di appartenenza:	Classe IIa secondo allegato IX della direttiva 93/42/CEE e s.m.i. (regola 6).
Certificato CE:	HD 60082613 0001 rilasciato dall'Organismo notificato TÜV Rheinland CE 0197
Destinazione d'uso:	Pungidito per campionamento di sangue capillare per successive analisi (glicemia).
Modalità d'uso:	la lancetta viene utilizzata in associazione con la penna (dispositivo di lancio REF 02-1000 che può essere opportunamente regolata per individuare la profondità di penetrazione più ottimale in relazione allo spessore della cute).

- **fig.1)** Rimuovere il cappuccio selettore della penna svitandolo in senso antiorario
- **fig.2)** Inserire saldamente la lancetta nell'apposito alloggiamento
- **fig.3)** Rimuovere il tappino di protezione della lancetta, avendo cura di conservarlo
- **fig.4)** Riposizionare il cappuccio di protezione avvitandolo.
- **fig.5)** Selezionare la profondità di penetrazione ruotando il cappuccio, (avvitando si predispone per una penetrazione maggiore)
- **fig.6)** Tenendo il dispositivo con una mano, con l'altra tirare il fondo scorrevole fino all'ottenimento di uno scatto, il dispositivo è pronto per l'uso
- **fig.7)** Appoggiare il dispositivo sul polpastrello, premere il bottoncino per azionare la lancetta
- **fig.8)** Rimuovere il cappuccio del dispositivo e fissare la punta della lancetta sul tappino precedentemente messo in disparte
- **fig.9)** Tenendo il dispositivo con una mano far scorrere avanti la levetta di espulsione facendo così sfilare la lancetta nell'apposito contenitore, riposizionare la levetta per il successivo utilizzo

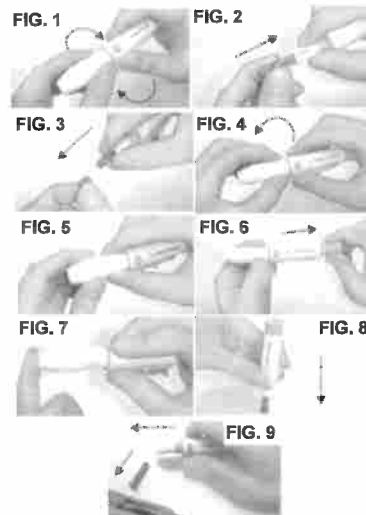

Compatibilità: Le lancette Chemil-soft sono compatibili con i seguenti dispositivi di lancio: SteriLance™ LDE; Autolet®; Microlet™; Autolet® mini; Glucolet®; Hemalet®; Soft touch®; AutoletLancet®; BD® Lancet Device; Pen let II®; Monojector®.

Sterilizzazione: Raggi gamma, conforme ISO 11137

Validità: 5 anni dalla data di produzione impressa sul confezionamento.

16 SET 2013

CHEMIL SRL
Giorgio Cognolato
Amministratore Delegato

Rev 1 del 20/09/2013 - Pag. 1 di 2

Avvertenze:

Questo dispositivo è stato studiato per uso personale e non deve essere condiviso con altre persone. Condividere questo dispositivo può comportare la trasmissione di malattie. Non utilizzare se il cappuccio risulta rimosso, non riutilizzare la lancetta, dopo l'uso gettare la lancetta in appositi contenitori.

Stoccaggio:

Immagazzinare in luoghi asciutti e lontano da fonti di calore.

Smaltimento:

Smaltire come rifiuto ospedaliero secondo disposizioni di legge.

Confezionamento:

Scatoline da 25 pezzi oppure da 50 pezzi.

Codici:

REF	Descrizione	Repertorio	CND
VX30G25	Calibro 30G (scatole 25pz)	14972/R	V0104
VX30G	Calibro 30G (scatole 50pz)	14972/R	
VX32G	Calibro 32G (scatole 50pz)	305277/R	

Immagine:

Lancette



Dispositivo di lancio
SteriLance™ LDE



Etichetta:

