


SCHEDA TECNICA

Dispositivo di lancio automatico (penna) per lancette pungidito monouso

Nome commerciale:	SteriLance™ LDE
Fabbricante:	SteriLance medical (Sozhou) inc.
Mandatario Europeo:	Emergo Europe – Molenstraat, 15 – 2513 BH the Hague The Netherlands.
Distributore per l'Italia:	Chemil s.r.l. Via Canada 23 – 35127 Padova.
Descrizione del prodotto:	Dispositivo di lancio automatico per lancette monouso sterili, dotato di sistema di regolazione della profondità tramite ghiera. Il dispositivo di sgancio permette la l'espulsione della lancetta dal corpo della penna semplicemente azionando con una sola mano il cursore, evitando quindi ogni contatto diretto con la lancetta utilizzata. Attivazione tramite pulsante posto in condizione da essere utilizzato con una sola mano. Realizzato in PP, cappuccio selettore in POM Supporto per lancetta in ABS, Molla in acciaio 304/1Cr18Ni9.
Standard di riferimento:	ISO 13485; ISO 9001; ISO 15223.
Classe di appartenenza:	Classe I non sterile, secondo allegato IX della direttiva 93/42/CEE e s.m.i.
Dichiarazione conformità:	Secondo allegato VII della direttiva 93/42/CEE e s.m.i.
Destinazione d'uso:	Lancio di lancette pungidito sterili per campionamento di sangue capillare per successive analisi (glicemia).
Modalità d'uso:	la Penna viene utilizzata in associazione con le lancette sterili Chemil-soft

- **fig.1)** Rimuovere il cappuccio selettore della penna svitandolo in senso antiorario
- **fig.2)** Inserire saldamente la lancetta nell'apposito alloggiamento
- **fig.3)** Rimuovere il tappino di protezione della lancetta, avendo cura di conservarlo
- **fig.4)** Riposizionare il cappuccio di protezione avvitandolo.
- **fig.5)** Selezionare la profondità di penetrazione ruotando il cappuccio, (avvitando si predispone per una penetrazione maggiore)
- **fig.6)** Tenendo il dispositivo con una mano, con l'altra tirare il fondo scorrevole fino all'ottenimento di uno scatto, il dispositivo è pronto per l'uso
- **fig.7)** Appoggiare il dispositivo sul polpastrello, premere il bottoncino per azionare la lancetta
- **fig.8)** Rimuovere il cappuccio del dispositivo e fissare la punta della lancetta sul tappino precedentemente messo in disparte
- **fig.9)** Tenendo il dispositivo con una mano far scorrere avanti la levetta di espulsione facendo così sfilare la lancetta nell'apposito contenitore, riposizionare la levetta per il successivo utilizzo

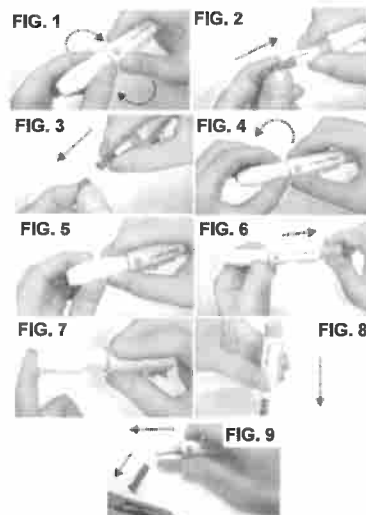

Compatibilità:	La penna è compatibile con le lancette monouso sterili Chemil-soft
Avvertenze:	Non lasciare la lancetta all'interno del dispositivo di lancio.
Stoccaggio:	Immagazzinare in luoghi asciutti e lontano da fonti di calore.
Confezionamento:	Scatolina da 1 dispositivo.

16 SET 2013

CHEMIL S.r.l.
Giorgio Cognolato
Amministratore Delegato

Codice:

02-1000

Repertorio: 314935/R


CND: V9009

Immagine:

Dispositivo di lancio
SteriLance™LDE



Lancette

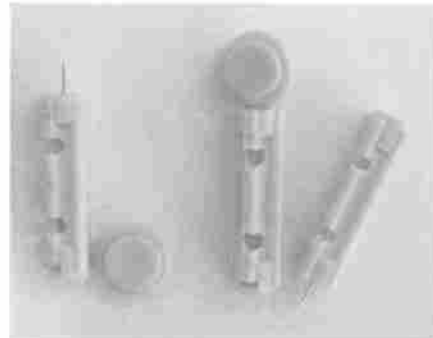

Etichetta:

125mm

25mm



CHEMIL S.R.L.
Giorgio Cognolato
Amministratore Delegato

16 SET 2013

Rev 1 del 20/09/2013 - Pag. 2 di 2