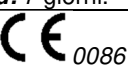


Nome commerciale del prodotto: KALTOSTAT
Descrizione del prodotto: Medicazione primaria progettata per assorbire l'essudato, favorire l'emostasi e la riparazione tissutale.
Indicazioni: Questa formulazione ipoallergenica, priva di attività farmacologica, trova applicazione in tutti i casi di trattamento delle ferite essudanti e/o sanguinanti quali: -Ulcere diabetiche -Ulcere da stasi venosa -Piaghe da decubito -Zone di prelievo cutaneo per trapianti -Ferite superficiali ed abrasioni
Modalità d'uso: Ritagliare la medicazione per conformarla alla grandezza della lesione e posizionarla all'interno della stessa. Rimuovere quando l'essudato fuoriesce dalla medicazione secondaria o quando clinicamente indicato.
Non usare come tampone chirurgico!
Composizione chimico-fisica: Medicazione soffice, di colore bianco, sterile composta da fibre di alginato di calcio e sodio nelle proporzioni di 80:20 e contenente acido mannuronico e guluronico in rapporto 2:1. Tali fibre assorbono l'essudato dell'ulcera cutanea e si trasformano in gel, formando un ambiente umido all'interfaccia della lesione.
LATEX FREE - FTALATI FREE

Metodo di sterilizzazione: sterilizzato a raggi gamma a non meno di 25 kGray pari a 2,5 Mrads.
Modalità di conservazione: conservare in luogo fresco ed asciutto.
Validità in anni: 3
Tempo massimo di permanenza in situ: 7 giorni.
Classe CE: IIb
 0086
CND M04040201
Identificativo e sede Stabilimento di produzione: Prodotto per conto di ConvaTec Ltd. – 1 st AVE DEESIDE Industrial Park Flintshire CH5 – 2NU – U.K.

Codici disponibili e modalità di presentazione / confezionamento					
Codice	Misure	Unità per confezione	Codifica ISO	Codice PARAF	RDM
9250	5 x 5 cm	10		A900604481	1348229/R
9251	7,5 x 12 cm	10		A900604517	1348302/R
9252	10 x 10 cm	5	09.21.12.003	A900604531	1348303/R
9253	10 x 20 cm	10		A900604556	1348304/R
9254	15 x 25 cm	10		A900604582	1348305/R
9256	Tampone da 2 g – 43 cm	5		A900604606	1348306/R

Caratteristiche fisiche	
Capacità di assorbimento	0,22 g/cm ²
Elasticità in %	Medicazione non elastica
Permeabilità al vapore	Medicazione non occlusiva
Altre indicazioni particolari	Se immersa in un fluido si idrata istantaneamente

	24h	48h	72h
Permeabilità al vapore (g/cm ²)	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
Capacità di assorbimento (g/cm ²)	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
Capacità di ritenzione (g/cm ²)	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE

Edizione	Data	Natura della modifica	Compilato
03A	20/09/16	Variazione logo	AQ
02A	26/08/08	Variazione ragione sociale	AQ
01A	20/10/00	Prima edizione	SAM