



Capelli S.r.l.
Via dell'Artigianato, 11
37056 Salizzole - VR –
Tel. 0456900365 - 0456901693
Fax 0456909696

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

KC 33

Cuscino preformato con fluidi automodellanti



CND: Y033303
CODICE REPERTORIO: 3819/R


Destinazione d'uso

Cuscino con base preformata integrata con fluidi automodellanti per la prevenzione delle piaghe da decubito.

Classificazione CE (Allegato IX Direttiva 93/42/CEE)

Classe I non sterile e senza funzione di misura (Regola 1).

Caratteristiche chimico-fisiche e dimensionali

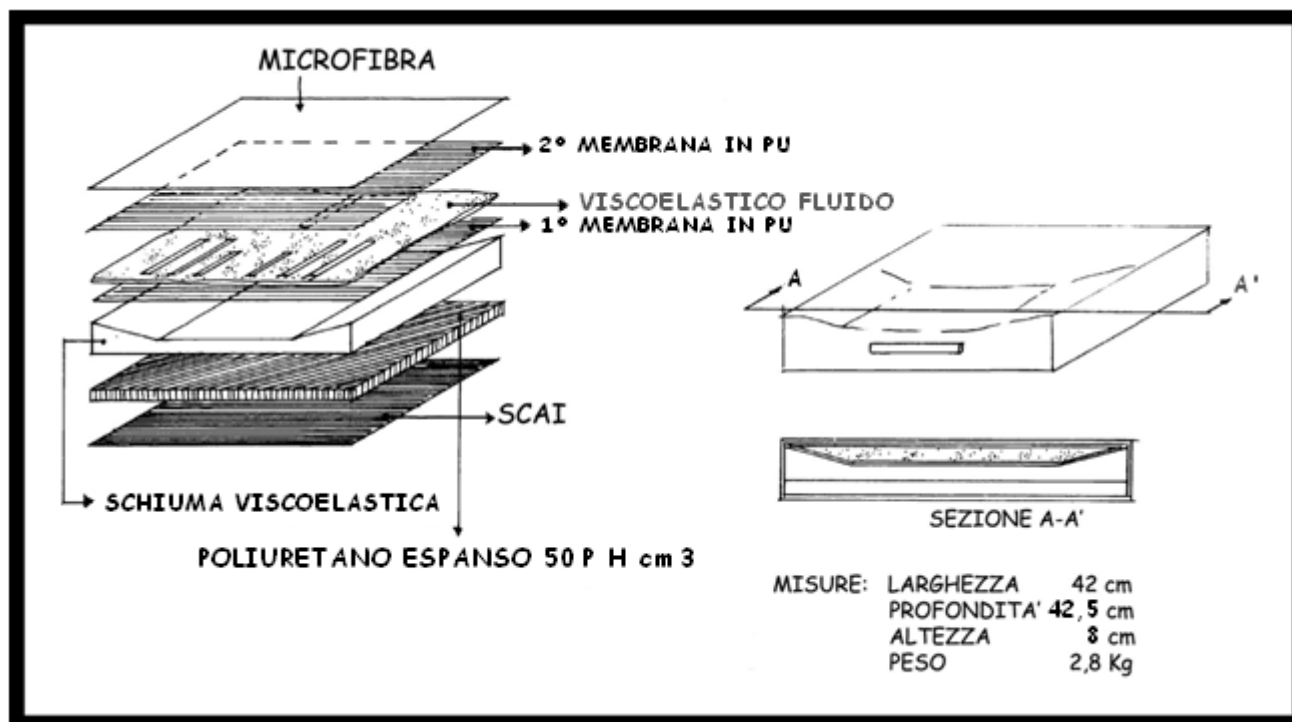

Il cuscino KC 33 è completamente sfoderabile. Il fodero è realizzato in microfibra traspirante e scai antiscivolo. Il silicone tixotropato è racchiuso da una prima membrana protettiva di poliuretano posta su una base preformata a due strati. Una seconda membrana protettiva in poliuretano racchiude sia la prima membrana che la base.

Modalità d'impiego

Posizionare il dispositivo con la cerniera rivolta verso lo schienale della seduta e la parte antiscivolo (gommata) rivolta verso il basso.

Manutenzione e pulizia





Capelli S.r.l.
Via dell'Artigianato, 11
37056 Salizzole - VR –
Tel. 0456900365 - 0456901693
Fax 0456909696

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

KC 33

Cuscino preformato con fluidi automodellanti



CND: Y033303
CODICE REPERTORIO: 3819/R

Si consiglia il lavaggio del fodero a mano con saponi neutri temperatura massima 40° C, o in lavatrice programma delicati.

La membrana che contiene il cuscino può essere pulita con alcool.

Avvertenze e precauzioni

Si consiglia l'uso ad un solo utente.

Utilizzare e conservare in posizione orizzontale.

Il cuscino KC 33 deve essere conservato e utilizzato lontano da fiamme libere e fonti di calore.

Il dispositivo deve essere sanificato prima dell'eventuale riutilizzo.

Non si è a conoscenza di eventuali effetti collaterali.

Modalità di smaltimento

Il dispositivo può essere smaltito come un normale rifiuto non tossico.

Diagramma delle pressioni

