	<p>Capelli S.r.l. Via dell'Artigianato, 11 37056 Salizzole - VR – Tel. 0456900365 - 0456901693 Fax 0456909696</p>	<p>SCHEDA TECNICA PRODOTTO</p>
<p>KM 23</p>	<p>Materasso bicomponente ventilato e forato</p>	<p>CE</p>
	<p>CND: Y033306 CODICE REPERTORIO: 6452/R</p>	


Destinazione d'uso

Materasso bicomponente ventilato e forato per la prevenzione delle piaghe da decubito.

Classificazione CE (Allegato IX Direttiva 93/42/CEE)

Classe I non sterile e senza funzione di misura (Regola 1).


Caratteristiche chimico-fisiche e dimensionali

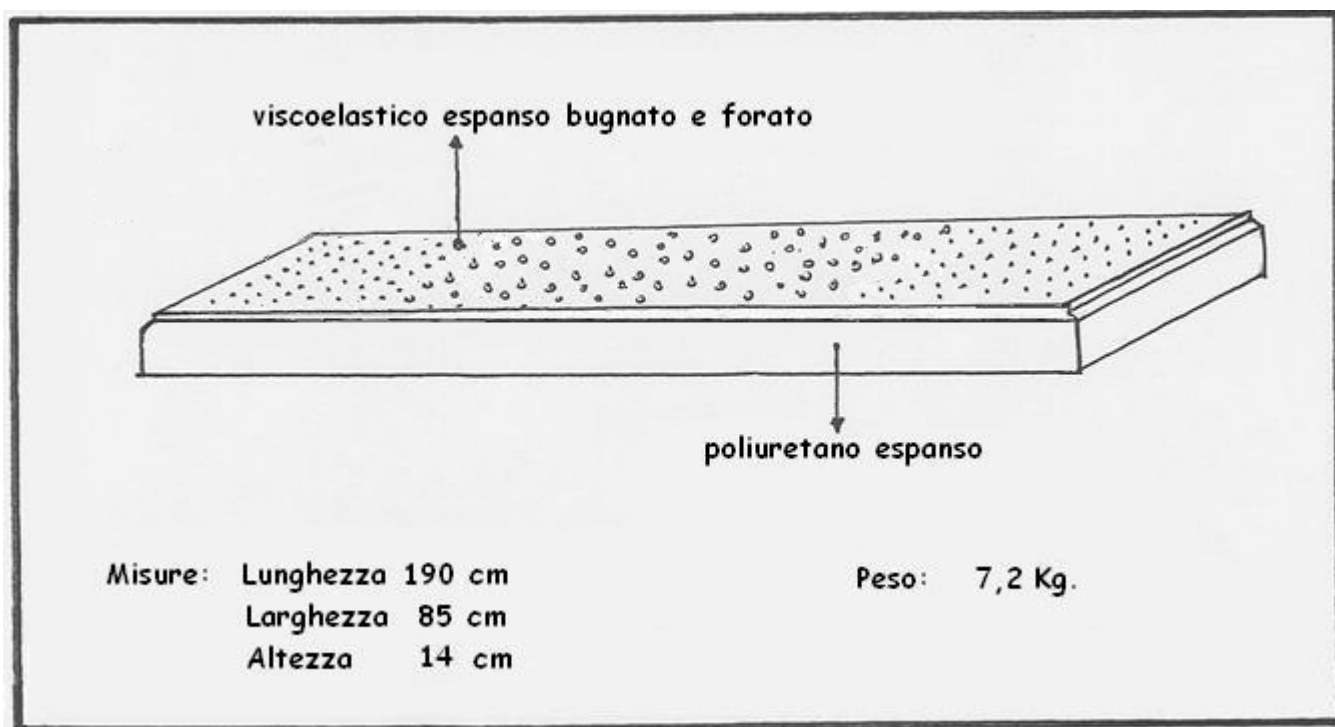

Il materasso KM 23 viene realizzato con una base portante in poliuretano espanso (cellula aperta) densità 30 Kg/m^3 alla quale viene applicata, mediante collante ad acqua, una lastra di schiuma viscoelastica (memoria di forma), densità 50 Kg/m^3 bugnata e forata su tutta la superficie.

Modalità d'impiego

Posizionare il dispositivo sul letto con la parte bugnata rivolta verso l'alto.
Si consiglia di interporre un fodero fra il dispositivo e l'utente.

	<p align="center">Capelli S.r.l. Via dell'Artigianato, 11 37056 Salizzole - VR – Tel. 0456900365 - 0456901693 Fax 0456909696</p>	<p align="center">SCHEDA TECNICA PRODOTTO</p>
<p>KM 23</p>	<p align="center">Materasso bicomponente ventilato e forato</p>	<p align="center">CE</p>
	<p>CND: Y033306 CODICE REPERTORIO: 6452/R</p>	

Manutenzione e pulizia

Si consiglia il lavaggio con acqua e detersivi con l'accorgimento di introdurre nella lavatrice lo stesso arrotolato e legato. La strizzatura può essere eseguita sia con mangano sia in centrifuga a bassa velocità. L'asciugatura può avvenire in una camera, non soleggiata, a correnti d'aria o con stufa a circolazione d'aria (temperatura massima 70° C.). Trattamento in autoclave con vapore acqueo saturo a temperatura max. di 100° C. per massimo dieci minuti.

Avvertenze e precauzioni

- Si consiglia l'uso ad un solo utente.
- Utilizzare e conservare in posizione orizzontale.
- Il materasso KM23 deve essere conservato e utilizzato lontano da fiamme libere e fonti di calore.
- Il dispositivo deve essere sanificato prima dell'eventuale riutilizzo.
- Il materasso KM 23 è estremamente sensibile all'aria e alla luce. Si consiglia un fodero di rivestimento integrale. L'eventuale perdita di colore dei componenti non pregiudica l'efficacia del materasso.
- Non si è a conoscenza di eventuali effetti collaterali.

Modalità di smaltimento

Il dispositivo può essere smaltito come un normale rifiuto non tossico.

Foto

